

SELAND CARE

TRAJE TÉRMICO Y ACCESORIOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



BENEFICIOS DE LA REHABILITACIÓN ACUATICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El agua es uno de los medios más adecuados para la rehabilitación y mantenimiento físico de personas con discapacidad. Cuando están en el agua su cuerpo se libera de esas ataduras físicas que conlleva la parálisis y disfrutan de la ingravidez. La utilización de un traje térmico es importantísimo ya que no se mueven lo suficiente en el agua para generar calor y la temperatura corporal baja rápidamente.

Con el traje de neopreno conseguimos mantener el calor corporal más tiempo y pueden hacer los ejercicios de rehabilitación sin necesidad de tener que suspenderlos enseguida, debido al temblor producido por el frío.

El neopreno aporta gran protección contra los impactos y rozaduras sobre todo para estas personas con discapacidades que no controlan bien los movimientos de su cuerpo, por lo que son mucho más vulnerables a sufrir lesiones.

El cuerpo se equilibra gracias a la capacidad de flotabilidad positiva del neopreno y la negativa de unos pesos repartidos individualmente de manera que nos ayuda a mantener a la persona en la postura adecuada en el agua para su rehabilitación. Además lleva como complemento un collarín flotante que mantiene la cabeza fuera del agua para aquellos que lo necesiten.

Facilita el trabajo en la piscina tanto a los cuidadores como a los profesionales de la rehabilitación.

Las personas con discapacidad pueden liberarse así de su cuerpo flotando en el agua, disfrutando del momento.





TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REF. SEOI1

Traje de neopreno dirigido a personas con dificultad en el control de la movilidad de su cuerpo o lesiones neurológicas como hemipléjicos, parapléjicos, tetrapléjicos y con parálisis cerebral.

Traje térmico confeccionado en neopreno de 3 mm de grosor. Biforrado con Nylon en el exterior y Ultrastretch Warm Plush en el interior. Cierre de velcro en la totalidad del traje. Velcros de seguridad en zonas de riesgo de apertura.

Es un traje muy sencillo de poner (entre 4-6 min): se abre totalmente, se coloca sobre una superficie (camilla o banco), se coloca a la persona encima y se cierra con velcros ajustandolo al cuerpo.

Controla el equilibrio en el agua, mantiene el calor y protege de posibles golpes.

El traje dispone de trece compartimentos con dos piezas de foam en cada una de ellos: dos en el pecho, uno grande en la espalda, dos en la parte alta del brazo y otras dos en los puños. En las piernas están dispuestos de la siguiente manera: dos en la parte delantera del muslo, otros dos en la trasera y dos en los tobillos. Se pueden añadir, quitar o cambiar las piezas de foam de un compartimento a otro para conseguir el equilibio necesario. Para conseguir una posición más vertical, hay que vaciar todos los bolsillos, e introducir los pesos en los tobillos. De esta manera las piernas bajan quedando en posición oblicua (sin llegar nunca a la vertical).

Cada traje tiene un collar para sujetar y mantener la cabeza fuera del agua. Se une al traje mediante un velcro y trabillas. Se regula con un foam grande y fijo, y cinco intercambiables.

El accesorio Pull-Neck es para los casos más severos, que necesitan una sujección total de la cabeza. Evita que esta gire la cabeza.

COLOR: Azul

TALLAS NIÑO: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

TALLAS ADULTO: S - M - L



El accesorio Pull-neck refuerza la dirección del cuello .Así se asegura la inmovilidad de la cabeza y facilita el trabajo del fisioterapeuta.



El collar cervical mantiene la cabeza sujeta y fuera del agua en la posición adecuada, gracias al neopreno con foam interior distribuido para regular el equilibrio segun las necesidades de cada individuo.



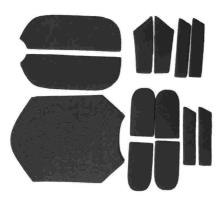












13 FOAMS

CUELLO

El traje dispone de trece compartimentos con dos piezas de foam en cada una de ellos: dos en el pecho, uno grande en la espalda, dos en la parte alta del brazo y otras dos en los puños. En las piernas están dispuestos de la siguiente manera: dos en la parte delantera del muslo, otros dos en la trasera y dos en los tobillos. Se pueden añadir, quitar o cambiar las piezas de foam de un compartimento a otro para conseguir el equilibio necesario. Para conseguir una posición más vertical, hay que vaciar todos los bolsillos, e introducir los pesos en los tobillos. De esta manera las piernas bajan quedando en posición oblicua (sin llegar nunca a la vertical).





5

FUERZA POSITIVA NEOPRENC FOAM

FUERZA NEGATIVA O PESO

8



PESOS PARA TRAJE TÉRMICO REF. SEOW1

- Pesos de 200 gr y 400 gr.
- Color amarillo que facilita su busqueda en la piscina en caso de que se caiga.
- Cobertura de seguridad antifuga del plomo.

TALLA: 200 o 400 gr





PESOS

SEOW1

CHAQUETA DE NEOPRENO ADAPTADA REF. SECJ9 A

- Chaqueta de neopreno adaptada para el disfrute y confort en el agua.
- Confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor y biforrada con Nylon.
- Fácil de poner gracias a su apertura completa. Cierre con cremallera en el pecho y velcros en los brazos.
- Contiene tres compartimentos en los que se introduce un foam que permite mantener el equilibrio en el agua. Están situados en el pecho y en la espalda. Estos foam-flotadores se pueden añadir o quitar, hasta conseguir la estabilidad y el confort necesario.
- Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta en 4 veces).
- Protección contra impacto y abrasiones.

COLOR: Azul, gris y amarillo

C4-C5-C6-3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL TALLAS:













PETO CORTO DE NEOPRENO ADAPTADO **REF. SECL9 A**

- Peto corto de neopreno adaptado para el disfrute y confort en el agua.
- Confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor biforrado con Nylon.
- Fácil de poner gracias a su apertura completa. Cierre con velcros en laterales y hombros.
- Contiene siete compartimentos en los que se introduce un foam que permite mantener el equilibrio en el agua. Estos foam-flotadores se pueden añadir o quitar, hasta conseguir la estabilidad y el confort necesario. Están situados en el pecho, espalda, zona lumbar y piernas (tanto delante como detrás). Foams de las piernas de quita y pon.
- Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta en 4 veces).
- Protección contra impacto y abrasiones.

Azul, gris y amarillo COLOR:

C4-C5-C6-3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL TALLAS:















COLLARÍN REF. SEOK2

Collarín cervical de neopreno de 3.5 mm de grosor.
Tejido interior Warm Plush, que genera un aumento de temperatura favoreciendo la relajación muscular.

• El collarín se adapta perfectamente al cuello, gracias a su diseño preformado.

• El cierre de velcro permite adaptarlo a diferentes contornos de cuello.

COLOR: Negro. Única TALLA:







BRAZALETE DIABÉTICOS REF. SEOA2

Brazalete protector para sensor de diabetes Freestyle.
La función del brazalete es mantener el sensor de diabetes Freestyle lo más protegido posible del roce.
brazalete de neopreno de 5 mm de grosor con interior de goma adherente

para minimizar la entrada de agua.

• Dispone de una cinta elástica para introducir el brazo y así poder ajustar

el brazalete y facilitar el ajuste con el velcro.









CALCETINES TÉRMICOS REF. SEOE1

Escarpines térmicos con sistema de total apertura y cierre fácil que mantiene el equilibrio individual en el agua y mantiene el calor en los pies a la vez que protege de golpes y abrasiones a personas con dificultades físicas o psíquicas durante la rehabilitación acuática. Confeccionado en neopreno de 3 mm de grosor. Biforrado con nylon en el exterior e interior con Ultrastretch Warm Plush (tejido que aporta calor extra). Cierre de velcro en la totalidad del escarpín. Estas son sus características principales:

- Fácil colocación (1 persona).
- Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta en 4 veces).
- Protección contra impacto y abrasiones.

COLOR: Negro en el exterior y gris en el interior. TALLAS (n^o pie): 29/31, 32/34, 35/37, 38/40, 41/43, 44/46













CALCETINES TÉRMICOS SEOE1



CINTURÓN Y CARTUCHERA PARA MEDICAMENTOS REF. SEOC1 / REF. SEOL1

Compartimento termo regulador para llevar sus medicamentos cómodamente y sobre todo protegidos (Insulina, adrenalina, antialérgicos u otra medicación de urgencia). Protege más tiempo el medicamento, aislandolo de las altas o bajas temperaturas. Puede llevarse por dentro o por fuera de la ropa.

El **cinturón** está confeccionado en neopreno de 3 mm de grosor y biforrado con Nylon tanto por el interior como el exterior para resguardar de la temperatura ambiental. Dispone de dos bolsillos con cierre de solapa y velcro para dos cargas de medicamento.

La **cartuchera** está confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor y biforrado con Nylon tanto por el interior como el exterior para resguardar de la temperatura ambiental. Dispone de dos bolsillos con cierre de solapa y velcro para dos cargas de medicamento.



PROTECTOR MULETAS REF. SEOA1

· Protector para las muletas.

• Amortiguadores y protectores para las manos.

• Se trata de una funda de neopreno de 5 mm de grosor.

• Biforrado con Nylon elastico suave.

• Su función es alíviar y amortiguar el apoyo del peso del cuerpo en la mano sobre la muleta.

COLOR: Negro TALLAS (num.pie): Vinica





CINTURÓN DE AYUDA A LA FLOTABILIDAD REF. SEOC3

• Sujección abdominal de ayuda a la flotabilidad.

• Está confeccionado en neopreno de 5 mm de grosor y biforrado con Nylon tanto en el exterior como en el interior.

• Cierre y ajuste con velcro.

• Contiene dos compartimentos interiores, en los que se introduce un foam que permite mantener el equilibrio en el agua. Estos foam-flotadores se pueden añadir o quitar, hasta conseguir la estabilidad y el confort necesario.

COLOR: Negro TALLAS: P y G











CINTURÓN DE SUJECCIÓN (Silla/butaca) REF. SEOC2

Está confeccionado en neopreno de 6 mm de grosor y biforrado con Nylon en el exterior y Velcro Plush en el interior, que permite el ajuste en cualquier contorno.

Dispone de dos aperturas en cada extremo para introducir los dedos y así poder ajustar y cerrar con mayor facilidad.

COLOR: Negro

TALLAS: P. CONTORNO MÁXIMO 124 cms (PERSONA + SILLA)
G.CONTORNO MÁXIMO 157 cms (PERSONA + SILLA)



ARNÉS REF. SEOC2-1

El arnés es un accesorio del cinturón de sujección para sillas o butacas.

Se compone de unos tirantes y un arnés acolchados que colocados en el cinturón ofrecen una mayor sujección de la persona que está sentada. Regulable.



ADVERTENCIAS

- La persona ha de usar el traje siempre bajo la supervisión. Es un traje de apoyo, NO PROTEGE CONTRA AHOGAMIENTOS.
- TODOS LOS VELCROS DEL TRAJE de rehabilitación HAN DE ESTAR DEBIDAMENTE CERRADOS para no dañar el tejido, tras la sesión de hidroterapia.
- A continuación aclarelo.

CONSEJOS DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

- Aclarar con agua tibia para quitar el cloro.
- No usar lavadora. Si fuera necesario, lavarlo a mano con un jabón neutro.
- No usar secadora. Secar el traje colgado de una percha con la parte del tronco y piernas abiertas, en un lugar seco y ventilado que no esté en contacto directo con el sol ni con ninguna fuente de calor.
- No usar plancha.
- Una vez el traje esté seco, volverlo a montar hasta que el traje quede completamente cerrado y los velcros en el sitio correcto, de no hacerse así, el velcro puede dañar el tejido y hacer que el traje pierda funcionalidad.



NEOPRENE SOLUTIONS S. I. c/Antsonekoa, 2 (P.I. Igeltzera 4-5) 48610 Urduliz (Bizkaia) - España Tel. +34 94 676 48 75 / selandcare@seland.com

www.seland.com